

ABDOHIP®

Curea abdominală cu crioterapie **ABDOHIP®**



- Brevet unic: granule de zăpadă maleabile
- Reutilizabil
- Niciun risc de arsuri pentru piele
- Ușor de utilizat
- Cu acțiune prelungită, temperatură rece constantă
- Ergonomic

BENEFICIILE CRIOTERAPIEI

Medicii chirurgi recunosc și utilizează din ce în ce mai mult crioterapia în asociere cu compresia ca metodă de tratament postoperator.

O metodă naturală, aceasta **reduce nivelul de durere** având în același timp **efect antiinflamator** (reducând edemul), precum și un efect **antihemoragic** și **analgezic**.

Utilizarea sa facilitează recuperarea pacientului și duce la o creștere mai rapidă a mobilității reducând în același timp utilizarea de tratament medicamentos.

TERAPIE LA RECE DE URMĂTOAREA GENERAȚIE CU FREEZSNOW®

Pe baza acestei observații, Ambelio a brevetat o formulă nouă pentru o terapie cu acțiune prelungită, cu temperatură rece constantă cu Freezsnow®.

Agentul de răcire Freezsnow® este o substanță brevetată cu capacitate termală și conductivitate excelente. Freezsnow® oferă o zăpadă rece prin transformarea granulelor de gel în cristale de gheață fără risc de degerături.



Înainte

După

- **Nu lezează pielea:** fără risc de degerături.
- **Reutilizabil:** ușor de pregătit în congelator.
- **Răcire eficientă:** temperatură rece constantă cu acțiune prelungită.
- **Maleabil:** oferă contactul optimizat cu corpul chiar și în stare congelată.
- **Confort:** segmentată special pentru a se mula după morfologia pacientului.



DESCRIERE ABDOHIP®



Cureaua abdominală cu crioterapie ABDOHIP® combină tratamentul la rece cu acțiune prelungită (până la 1 oră) și compresia. Este dotată cu două pachete reci cu acțiune prelungită Freezsnow® (inclusiv un set de rezervă).

Sistemul de fixare cu arici permite ajustarea curelei abdominale și a săculețului lateral pentru a fi fixat pe pacient, cu săculețul poziționat pe piciorul drept sau stâng (mod ambidextru).


INDICAȚII

- Postoperator după intervenția chirurgicală la nivelul șoldului.
- Trauma șoldului.
- După detensionarea mușchilor peretelui abdominal.
- Boala cronică a șoldului.
- Tendon.
- Recuperarea sportivă.




RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

- 1** Deschideți cureaua abdominală și amplasați pachetul rece direct din congelator în interiorul curelei utilizând sistemul de fixare cu arici. Amplasare anterioară și posterioară.

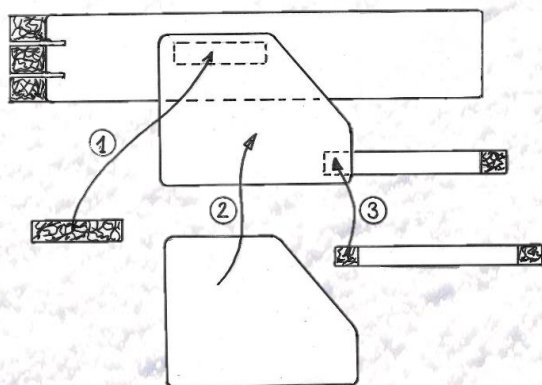


Partea piciorului stâng

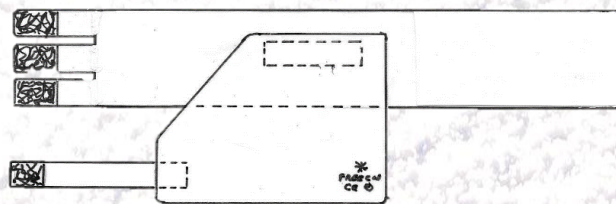

Partea piciorului drept


- 2** Poziționați cureaua cu săculețul atașat în jurul taliei, ca și cum ați pune o curea abdominală.

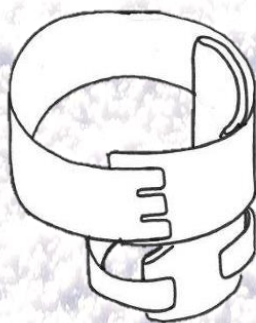

Piciorul stâng

3

Cureaua abdominală trebuie poziționată conform diagramei, cu pachetul rece în jurul șoldului și partea superioară a coapsei.

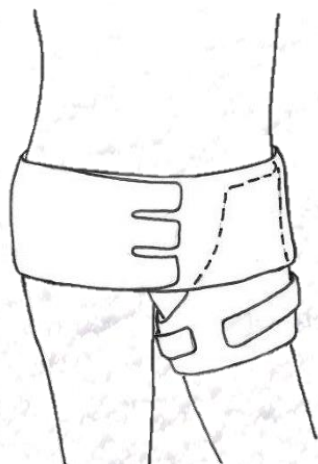

Piciorul stâng

INFORMAȚII ESENȚIALE

Cele două pachete reci Freezsnow® trebuie amplasate în congelator (în pungă etanșă furnizată) timp de cel puțin 4 până la 6 ore înainte de utilizare.

Important: distribuiți granulele de gel uniform înainte de congelare și congelați pachetul rece plat pentru o mai bună distribuție a temperaturii. Așteptați unul până la două minute după ce îl scoateți din congelator pentru a netezi deformările.

Păstrați pachetele reci în congelator după sau între utilizări.

Aplicați tratamentul rece în cicluri de 30 de minute sau conform indicațiilor cadrului medical calificat.

Coduri

Descriere

Ambalaje

0ABDOS10000	ABDOHIP® Dimensiunea 1: talie 66 cm - 100 cm	1
0ABDOS20000	ABDOHIP® Dimensiunea 2: talie 100 cm - 140 cm	1



ZA de Beauséjour
Rue de l'Aiguillage
35520 LA MEZIERE
FRANCE
contact@ambelio.com
www.ambelio.com



Carefully read the instructions for use that comes with the medical device or labeling provided to medical professionals. Class I device. Document not legally binding – Can be modified without prior notice. Manufactured by AMBELIO © 2019, Ref BRABDORO – v01.121220