

DENTALFREEZ®

Mască dentară cu crioterapie



- Brevet unic: granule de zăpadă maleabile
- Reutilizabil
- Niciun risc de arsuri pentru piele
- Ușor de utilizat
- Cu acțiune prelungită, temperatură rece constantă
- Ergonomic

BENEFICIILE CRIOTERAPIEI


Medicii chirurgi recunosc și utilizează din ce în ce mai mult crioterapia în asociere cu compresia ca metodă de tratament postoperator.

O metodă naturală, aceasta **reduce nivelul de durere** având în același timp **efect antiinflamator** (reducând edemul), precum și un efect **antihemoragic** și **analgezic**.

TERAPIE LA RECE DE URMĂTOAREA GENERAȚIE CU FREEZSNOW®

Pe baza acestei observații, Ambelio a brevetat o formulă nouă pentru o terapie cu acțiune prelungită, cu temperatură rece constantă cu Freezsnow®.

Agentul de răcire Freezsnow® este o substanță brevetată cu capacitate termală și conductivitate excelente. Freezsnow® oferă o zăpadă rece prin transformarea granulelor de gel în cristale de gheață fără risc de degerături.

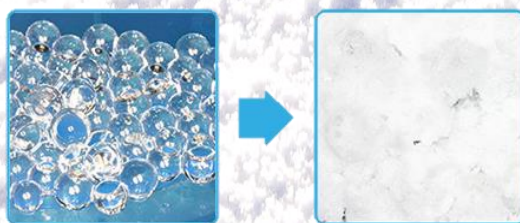

Înainte

După



- **Nu lezează pielea:** fără risc de degerături (Temperatură între 0-5 °C).
- **Reutilizabil:** ușor de pregătit în congelator.
- **Răcire eficientă:** temperatură rece constantă cu acțiune prelungită.
- **Ușor de utilizat:** Pliabil și ușor adaptabilă pentru a se potrivi formei feței.
- **Confort:** Fabricată din material izolator confortabil, pachetul poate fi utilizat direct pe piele.



DESCRIERE DENTALFREEZ®



Noua terapie la rece Freezsnow® nou brevetată oferă tratament cu acțiune prelungită fără a arde pielea. Acest brevet inovator transformă granulele de gel în zăpadă. Maska dentară DENTALFREEZ® ajută la ameliorarea durerii după intervenția chirurgicală sau după traumă, reducând tumefierea și inflamația.

- Non-Toxic
- Reutilizabil
- Se modelează după formă
- Dimensiune ajustabilă


INDICAȚII

- Postoperator după intervenția chirurgicală dentară, maxilofacială sau estetică.
- Post-traumă.
- Extracții dentare.
- Dinți de minte.
- Implanturi.
- Periodonție.
- Inflamație.
- Edem.
- Cariii.
- Endodonție.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

- 1** Aplicați masca în jurul maxilarului și deasupra nasului, astfel încât nasul și gura să intre prin deschideri (A).

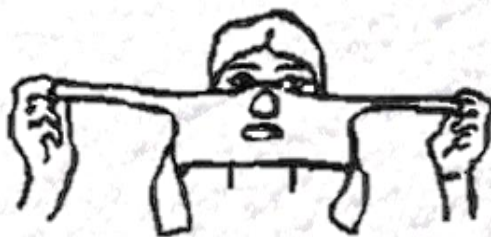

A

- 2** Atașați ambele curele superioare (B) și apoi ambele curele inferioare (C&D) utilizând benzile cu arici.



B



C



D

- 3** Scoateți pachetele reci Freezsnow® din congelator și introduceți-le în mască pe partea feței care este inflamată și dureroasă (E). Strângeți benzile pentru a obține compresia dorită.



E



INFORMAȚII ESENȚIALE

Cele două pachete reci Freezsnow® trebuie amplasate în congelator (în pungă etanșă furnizată) timp de cel puțin 4 până la 6 ore înainte de utilizare.

Important: distribuiți granulele de gel uniform înainte de congelare și congelați pachetul rece plat pentru o mai bună distribuție a temperaturii. Așteptați unul până la două minute după ce îl scoateți din congelator pentru a netezi deformările.

Păstrați pachetele reci în congelator după sau între utilizări.

Aplicați tratamentul rece în cicluri de 30 de minute sau conform indicațiilor cadrului medical calificat.

Coduri

0DENTUS0000

Descriere

DENTALFREEZ® One Size
Pack of 12 units

Ambalaje

1



Carefully read the instructions for use that comes with the medical device or labeling provided to medical professionals. Class I device. Document not legally binding – Can be modified without prior notice. Manufactured by AMBELIO © 2020, Ref BRDENTRO – v01.121220



ZA de Beauséjour
Rue de l'Aiguillage
35520 LA MEZIERE
FRANCE
contact@ambelio.com
www.ambelio.com

